

# JOBST® RONDBREI ASSOR- TIMENT



N I E T S H O U D T J E T E G E N



ULTRASHEER | OPAQUE | MATERNITY OPAQUE | CLASSIC |  
FORMEN AMBITION | FORMEN EXPLORE | BELLAVAR | BELLA LITE

# ALTIJD EEN OPLOSSING DIE BIJ JE PATIËNTEN PAST

---


Bij JOBST helpen we zorgprofessionals om de meest effectieve behandeling te bieden die past bij de behoefte en levensstijl van de patiënt. In deze brochure lees je meer over het assortiment rondbreikousen van JOBST: JOBST Ultrasheer, JOBST Opaque, JOBST Maternity Opaque, JOBST Classic, JOBST forMen Ambition, JOBST forMen Explore, JOBST Bellavar, JOBST Bella Lite.



# UNIEKE INNOVATIE VOOR MEER COMFORT

---

**SoftFit-technologie** is een unieke innovatie voor extra comfort. Het verhoogt het draagcomfort van de kous dankzij het meegebreide siliconengaren aan de binnenzijde van het boord. Het speciale garen sluit zacht aan op de huid en houdt de kousen op hun plek. Het hogere draagcomfort draagt tevens bij aan een betere therapietrouw.

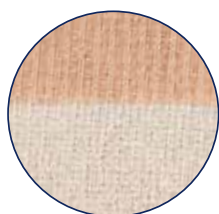

# JOBST® ULTRASHEER








Geschikt voor varices zonder oedeem,  
preventie (CCL1)



## KENMERKEN

- Glanzende kous voor stijlvolle look
- Mooie transparantie dankzij fijne, ademende zachte garens

## ASSORTIMENT

Uitvoering ▼								
		AD	AG	AT	AD*	AF*	AG*	AT*
Druk- klasse	CCL 1: 18 - 21 mmHg	●	●	●	●	●	●	●
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●
Boord- afwerking	SoftFit	●			●			
	Sensitive		●			●	●	
	Kant		●			●	●	
	Bloem		●			●	●	
Teen- stuk	Open	●	●	●	●	●	●	●
	Gesloten	●	●	●	●	●	●	●
Opties	Maxibroek			●				
	Zwangerschap			●				●

\*Alleen maatwerk

Kijk voor alle opties en tijdelijke trendkleuren op [jobst.nl](http://jobst.nl)

## SAMENSTELLING

Klasse	Polyamide	Elastaan
1	64%	36%
2	60%	40%

## KLEUREN




## AFWERKING



# MAATTABEL

JOBST® UltraSheer

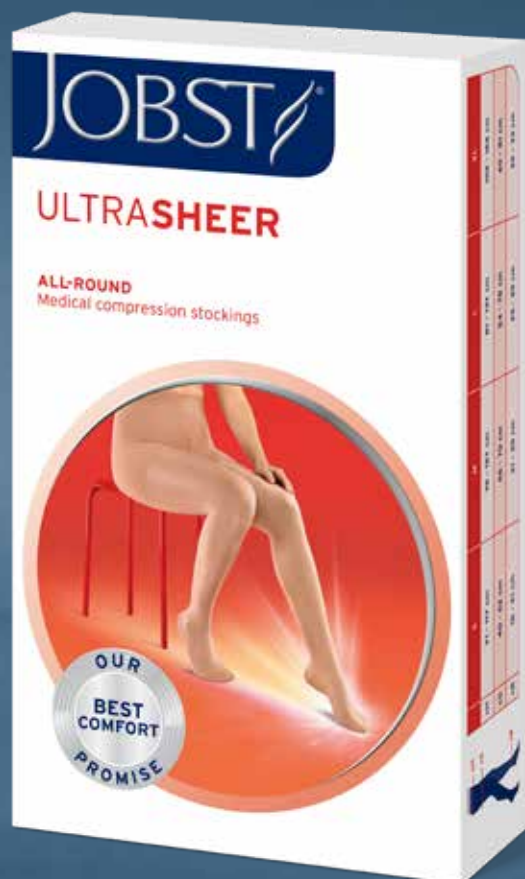

## CONFECTIE MAATTABEL (IN CM)

Meetpunt	I	I Plus	II	II Plus	III	III Plus	IV	IV Plus	V	V Plus	VI	VI Plus
<b>cT</b>	> 80		> 90		> 90		> 110		> 110		> 120	
<b>cH</b>	> 95		> 105		> 105		> 125		> 125		> 135	
<b>cG siliconenband</b>	43 - 48	49 - 57	45 - 52	53 - 62	49 - 56	57 - 67	53 - 60	61 - 72	56 - 64	65 - 77	60 - 68	69 - 81
<b>cG</b>	43 - 57		45 - 62		49 - 67		53 - 72		56 - 77		60 - 81	
<b>cF</b>	39 - 52		41 - 56		44 - 60		47 - 65		50 - 69		53 - 73	
<b>cE</b>	30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 45		39 - 48		41 - 51	
<b>cD</b>	27 - 33		29 - 36		32 - 39		34 - 42		36 - 45		38 - 48	
<b>cC</b>	28 - 34		30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 46		39 - 49	
<b>cB1</b>	23 - 27		24 - 29		26 - 32		29 - 35		31 - 37		33 - 39	
<b>cB</b>	18 - 20		20 - 22		22 - 24		24 - 26		26 - 28		28 - 30	
<b>cY</b>	26 - 31		28 - 33		29 - 35		31 - 37		32 - 38		33 - 40	
<b>cA</b>	17 - 22		19 - 24		21 - 26		23 - 29		25 - 32		27 - 34	

### Lengte D

ID petite: 34 - 39 cm  
ID regular: 39 - 45 cm

### Lengte G

IG petite: 60 - 69 cm  
IG regular: 70 - 80 cm  
IG lang\*\*: 81 - 90 cm

### Lengte K (voor panty)

IK petite: 65 - 75 cm  
IK regular: 75 - 85 cm

Eén voetlengte per standaardmaat (voetlengte is afhankelijk van lengtemaat).

Kies voor de Plus-maat als de gemeten G-omvang aan de rechterkant van de kolom uitvalt.

\* Alleen beschikbaar als panty

\*\*Lengte G lang alleen beschikbaar in JOBST Classic

# JOBST® OPAQUE











Geschikt voor varices zonder oedeem, preventie (CCL1), CVI met oedeem<sup>1</sup> en zwangerschapsvarices



## KENMERKEN

- **Zachte, verhullende en luchtdoorlatende kous**
- Patiënt vindt comfort en **aantrekkelijk** belangrijk en heeft benen zonder grote omvangverschillen

## ASSORTIMENT

Uitvoering ▼											
		AD	AG	AG-T	AT	AD*	AF*	AG*	AG-T*	ATGT*	AT*
Druk- klasse	CCL 1: 18 - 21 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Boord- afwerking	Noppen	●	●			●	●	●			
	SoftFit	●				●					
	Sensitive		●				●	●			
	Kant		●				●	●			
Teen- stuk	Open	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Gesloten	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Opties	Maxibroek				●						
	Gulp				●					●	●
	Compressiebroek								●	●	●
	Compressiebroek/gulp									●	●

\*Aleen maatwerk

Kijk voor alle opties en tijdelijke trendkleuren op [jobst.nl](http://jobst.nl)


## SAMENSTELLING

Klasse	Polyamide	Elastaan
1	64%	36%
2	60%	40%

## KLEUREN




## AFWERKING

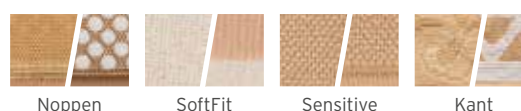

<sup>1</sup>Voor een optimale therapeutische werking is het belangrijk dat de patiënt voldoende mobiliseert.

# MAATTABEL

JOBST® Opaque

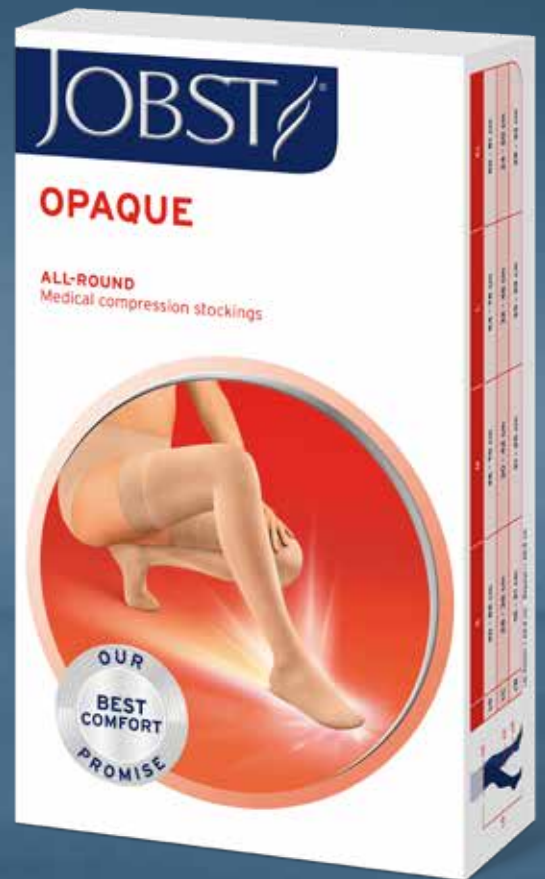

## CONFECTIE MAATTABEL (IN CM)

Meetpunt	I	I Plus	II	II Plus	III	III Plus	IV	IV Plus	V	V Plus	VI	VI Plus
<b>cT</b>	> 80		> 90		> 90		> 110		> 110		> 120	
<b>cH</b>	> 95		> 105		> 105		> 125		> 125		> 135	
<b>cG siliconenband</b>	43 - 48	49 - 57	45 - 52	53 - 62	49 - 56	57 - 67	53 - 60	61 - 72	56 - 64	65 - 77	60 - 68	69 - 81
<b>cG</b>	43 - 57		45 - 62		49 - 67		53 - 72		56 - 77		60 - 81	
<b>cF</b>	39 - 52		41 - 56		44 - 60		47 - 65		50 - 69		53 - 73	
<b>cE</b>	30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 45		39 - 48		41 - 51	
<b>cD</b>	27 - 33		29 - 36		32 - 39		34 - 42		36 - 45		38 - 48	
<b>cC</b>	28 - 34		30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 46		39 - 49	
<b>cB1</b>	23 - 27		24 - 29		26 - 32		29 - 35		31 - 37		33 - 39	
<b>cB</b>	18 - 20		20 - 22		22 - 24		24 - 26		26 - 28		28 - 30	
<b>cY</b>	26 - 31		28 - 33		29 - 35		31 - 37		32 - 38		33 - 40	
<b>cA</b>	17 - 22		19 - 24		21 - 26		23 - 29		25 - 32		27 - 34	

### Lengte D

ID petite: 34 - 39 cm  
ID regular: 39 - 45 cm

### Lengte G

IG petite: 60 - 69 cm  
IG regular: 70 - 80 cm  
IG lang\*\*: 81 - 90 cm

### Lengte K (voor panty)

IK petite: 65 - 75 cm  
IK regular: 75 - 85 cm

Eén voetlengte per standaardmaat (voetlengte is afhankelijk van lengtemaat).

Kies voor de Plus-maat als de gemeten G-omvang aan de rechterkant van de kolom uitvalt.

\* Alleen beschikbaar als panty

\*\*Lengte G lang alleen beschikbaar in JOBST Classic

# JOBST® MATERNITY OPAQUE


Geschikt voor zwangerschapsvarices,  
CVI met oedeem<sup>1</sup>



## KENMERKEN

- Zachte kous die zeer geschikt is tijdens de **zwangerschap**
- Ontworpen voor een **groeibende buik**
- Patiënt vindt comfort en **aantrekkelijkheid** belangrijk

## ASSORTIMENT

Uitvoering		
Uitvoering		ATZ
Druk- klasse	CCL 1: 18 - 21 mmHg	●
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	●
Teen- stuk	Open	●
	Gesloten	●

\*Alleen maatwerk

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op [jobst.nl](http://jobst.nl)

## SAMENSTELLING

Klasse	Polyamide	Elastaan
1	64%	36%
2	60%	40%

## KLEUREN



Caramel

Anthracite

Black

Navy



Cranberry

### SOFTFLEX-ZONE IN HET BUIKGEBIED

De JOBST Maternity Opaque zwangerschapspanty is uitgerust met een SoftFlex-zone in het buikgebied. Het broekgedeelte combineert een zacht gevoel met een betrouwbare pasvorm. De elastische stretchzone past zich aan de groeiende buik aan en knelt niet in het taillegebied.



<sup>1</sup>Voor een optimale therapeutische werking is het belangrijk dat de patiënt voldoende mobiliseert.



# MAATTABEL

JOBST® Maternity Opaque\*



## CONFECTIE MAATTABEL (IN CM)

Meetpunt	I	I Plus	II	II Plus	III	III Plus	IV	IV Plus	V	V Plus	VI	VI Plus
<b>cT</b>	> 80		> 90		> 90		> 110		> 110		> 120	
<b>cH</b>	> 95		> 105		> 105		> 125		> 125		> 135	
<b>cG siliconenband</b>	43 - 48	49 - 57	45 - 52	53 - 62	49 - 56	57 - 67	53 - 60	61 - 72	56 - 64	65 - 77	60 - 68	69 - 81
<b>cG</b>	43 - 57		45 - 62		49 - 67		53 - 72		56 - 77		60 - 81	
<b>cF</b>	39 - 52		41 - 56		44 - 60		47 - 65		50 - 69		53 - 73	
<b>cE</b>	30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 45		39 - 48		41 - 51	
<b>cD</b>	27 - 33		29 - 36		32 - 39		34 - 42		36 - 45		38 - 48	
<b>cC</b>	28 - 34		30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 46		39 - 49	
<b>cB1</b>	23 - 27		24 - 29		26 - 32		29 - 35		31 - 37		33 - 39	
<b>cB</b>	18 - 20		20 - 22		22 - 24		24 - 26		26 - 28		28 - 30	
<b>cY</b>	26 - 31		28 - 33		29 - 35		31 - 37		32 - 38		33 - 40	
<b>cA</b>	17 - 22		19 - 24		21 - 26		23 - 29		25 - 32		27 - 34	

### Lengte D

ID petite: 34 - 39 cm  
ID regular: 39 - 45 cm

### Lengte G

IG petite: 60 - 69 cm  
IG regular: 70 - 80 cm  
IG lang\*\*: 81 - 90 cm

### Lengte K (voor panty)

IK petite: 65 - 75 cm  
IK regular: 75 - 85 cm

Eén voetlengte per standaardmaat (voetlengte is afhankelijk van lengtemaat).

Kies voor de Plus-maat als de gemeten G-omvang aan de rechterkant van de kolom uitvalt.

\* Alleen beschikbaar als panty

\*\*Lengte G lang alleen beschikbaar in JOBST Classic

# JOBST® CLASSIC











Geschikt voor varices met en zonder oedeem, CVI met oedeem<sup>1</sup> en zwangerschapsvarices



## KENMERKEN

- **Stevige en duurzame kous** voor **actieve patiënten**
- Patiënt heeft **meer oedeemneiging** en meer ondersteuning nodig

## ASSORTIMENT

Uitvoering ▼											
		AD	AG	AG-T	AT	AD*	AF*	AG*	AG-T*	ATGT*	AT*
Druk- klasse	CCL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CCL 3: 34 - 42 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Boord- afwerking	Noppen	●	●			●	●	●			
	SoftFit	●				●					
	Kant					●	●				
Teen- stuk	Open	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Gesloten	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Opties	Zwangerschap				●						●
	Gulp				●				●	●	●
	Compressiebroek							●	●	●	●
	Compressiebroek/gulp								●	●	●

\*Alleen maatwerk

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op [jobst.nl](http://jobst.nl)

## SAMENSTELLING

Klasse	Polyamide	Elastaan
2	63%	37%
3	63%	37%

## KLEUREN



Sand

Pearl

Topas

Black\*



Anthracite\*\*

## AFWERKING



Noppen

SoftFit

Kant

\* Black ook leverbaar in ribuitvoering.

\*\*Anthracite en Black ribuitvoering alleen leverbaar in AD confectie met gesloten teen.

<sup>1</sup>Voor een optimale therapeutische werking is het belangrijk dat de patiënt voldoende mobiliseert.

# MAATTABEL

JOBST® Classic



## CONFECTIE MAATTABEL (IN CM)

Meetpunt	I	I Plus	II	II Plus	III	III Plus	IV	IV Plus	V	V Plus	VI	VI Plus
<b>cT</b>	> 80		> 90		> 90		> 110		> 110		> 120	
<b>cH</b>	> 95		> 105		> 105		> 125		> 125		> 135	
<b>cG siliconenband</b>	43 - 48	49 - 57	45 - 52	53 - 62	49 - 56	57 - 67	53 - 60	61 - 72	56 - 64	65 - 77	60 - 68	69 - 81
<b>cG</b>	43 - 57		45 - 62		49 - 67		53 - 72		56 - 77		60 - 81	
<b>cF</b>	39 - 52		41 - 56		44 - 60		47 - 65		50 - 69		53 - 73	
<b>cE</b>	30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 45		39 - 48		41 - 51	
<b>cD</b>	27 - 33		29 - 36		32 - 39		34 - 42		36 - 45		38 - 48	
<b>cC</b>	28 - 34		30 - 37		33 - 40		35 - 43		37 - 46		39 - 49	
<b>cB1</b>	23 - 27		24 - 29		26 - 32		29 - 35		31 - 37		33 - 39	
<b>cB</b>	18 - 20		20 - 22		22 - 24		24 - 26		26 - 28		28 - 30	
<b>cY</b>	26 - 31		28 - 33		29 - 35		31 - 37		32 - 38		33 - 40	
<b>cA</b>	17 - 22		19 - 24		21 - 26		23 - 29		25 - 32		27 - 34	

### Lengte D

ID petite: 34 - 39 cm  
ID regular: 39 - 45 cm

### Lengte G

IG petite: 60 - 69 cm  
IG regular: 70 - 80 cm  
IG lang\*\*: 81 - 90 cm

### Lengte K (voor panty)

IK petite: 65 - 75 cm  
IK regular: 75 - 85 cm

Eén voetlengte per standaardmaat (voetlengte is afhankelijk van lengtemaat).

Kies voor de Plus-maat als de gemeten G-omvang aan de rechterkant van de kolom uitvalt.

\* Alleen beschikbaar als panty

\*\*Lengte G lang alleen beschikbaar in JOBST Classic

# JOBST® FORMEN AMBITION

Geschikt voor varices zonder oedeem,  
CVI met oedeem<sup>1</sup>



## KENMERKEN

- Een **stijlvolle kous** die lijkt op een sok en de voeten dagelijks fris houdt
- Patiënt heeft normale tot **smalle kuiten**
- Door het **hoge katoengehalte** voelt de kous de hele dag prettig

## ASSORTIMENT

Uitvoering		AD	
Drukklassen	CCL 1: 18 - 21 mmHg	●	
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	●	
	CCL 3: 34 - 42 mmHg	●	
Teenstuk	Open		
	Gesloten	●	

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op [jobst.nl](http://jobst.nl)

## SAMENSTELLING

Klasse	Katoen	Polyamide	Polyester	Elastaan
1	15%	63%	1%	21%
2	15%	59%	1%	25%
3	15%	57%	1%	27%

## KLEUREN



Khaki      Brown      Navy      Black      Anthracite



## CONFECTIE MAATTABEL (IN CM)

Meetpunt	1	2	3	4	5	6
cD	28 - 34	31 - 38	34 - 41	37 - 46	40 - 49	42 - 52
cC	30 - 36	32 - 40	34 - 43	38 - 47	40 - 50	43 - 53
cB1	23,5 - 27,5	26 - 30,5	28,5 - 33	31 - 36,5	33,5 - 39	35,5 - 41,5
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30
cY	26 - 31	28 - 33	29 - 35	31 - 37	32 - 38	33 - 40
cA	17 - 22	19 - 24	21 - 26	23 - 29	25 - 32	27 - 34

### Lengte D

ID regular: 39 - 45 cm      ID lang: 45 - 51 cm

<sup>1</sup>Voor een optimale therapeutische werking is het belangrijk dat de patiënt voldoende mobiliseert.

# JOBST® FORMEN EXPLORE

Geschikt voor varices zonder oedeem,  
CVI met oedeem<sup>1</sup>



## KENMERKEN

- Een **stoere kous** die lijkt op een sok en de voeten dagelijks fris houdt
- Patiënt heeft **volle kuiten**
- Door het **hoge katoengehalte** voelt de kous de hele dag prettig

## ASSORTIMENT

Uitvoering		AD	
Drukklassen	CCL 1: 18 - 21 mmHg	●	
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	●	
	CCL 3: 34 - 42 mmHg	●	
Teenstuk	Open		
	Gesloten	●	

Kijk voor alle mogelijke combinaties en opties op [jobst.nl](http://jobst.nl)

## SAMENSTELLING

Klasse	Katoen	Polyamide	Polyester	Elastaan
1	23%	46%	1%	30%
2	25%	39%	1%	35%
3	27%	33%	1%	39%

## KLEUREN



## CONFECTIE MAATTABEL (IN CM)

Meetpunt	1	2	3	4	5	6
cD	28 - 34	31 - 38	34 - 41	37 - 46	40 - 49	42 - 52
cC	30 - 36	32 - 40	34 - 43	38 - 47	40 - 50	43 - 53
cB1	23,5 - 27,5	26 - 30,5	28,5 - 33	31 - 36,5	33,5 - 39	35,5 - 41,5
cB	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30
cY	26 - 31	28 - 33	29 - 35	31 - 37	32 - 38	33 - 40
cA	17 - 22	19 - 24	21 - 26	23 - 29	25 - 32	27 - 34

### Lengte D

ID regular: 39 - 45 cm ID lang: 45 - 51 cm

<sup>1</sup>Voor een optimale therapeutische werking is het belangrijk dat de patiënt voldoende mobiliseert.

# JOBST® BELLAVAR BEENKOUS












Geschikt voor varices met oedeem en lymfoedeem in beginstadium



## KENMERKEN

- Rondbreikous van een **bijzonder stevige kwaliteit**
- Ook inzetbaar bij **lymfoedeem ISL 0-1**
- Patiënt heeft benen **zonder grote omvangverschillen**

## ASSORTIMENT

Uitvoering ▼												
		AD	AF	AG	AG-T	AT	AD*	AF*	AG*	AG-T*	ATGT*	AT*
Druk-klasse	CCL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CCL 3: 34 - 42 mmHg						●	●	●	●	●	●
Boord-afwerking	Noppen		●	●			●	●	●			
	Kant							●	●			
Teen-stuk	Open	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Gesloten	●					●	●	●	●	●	●
Opties	Zwangerschap											●
	Gulp					●					●	●
	Compressiebroek								●	●	●	●
	Compressiebroek/gulp									●	●	●

\*Alleen maatwerk

Kijk voor alle opties en tijdelijke trendkleuren op [jobst.nl](http://jobst.nl)

## SAMENSTELLING

Klasse	Polyamide	Elastaan
2	65%	35%
3	65%	35%

## KLEUREN



Sahara

Pearl

Black\*

## AFWERKING



Noppen

Kant

\*Black alleen in maatwerk beschikbaar

# MAATTABEL

JOBST® Bellavar beenkous



## CONFECTIE MAATTABEL (IN CM)

Maat ▶	I	II	III	IV	V	VI
Meetpunt ▼						
<b>cG</b>	42 - 44	46 - 48	50 - 52	54 - 56	58 - 60	62 - 64
<b>cF</b>	39 - 41	42 - 44	45 - 47	48 - 50	51 - 53	54 - 56
<b>cE</b>	29 - 31	32 - 34	35 - 37	38 - 40	41 - 43	44 - 46
<b>cD</b>	26 - 28	29 - 31	32 - 34	35 - 37	38 - 40	41 - 43
<b>cC</b>	29 - 30	31 - 33	34 - 36	37 - 39	40 - 42	43 - 45
<b>cB1</b>	23 - 24	25 - 26	27 - 28	29 - 30	31 - 32	33 - 34
<b>cB</b>	18 - 19	20 - 21	22 - 23	24 - 25	26 - 27	28 - 29
<b>cY</b>	27 - 28	29 - 30	31 - 32	33 - 34	35 - 36	37 - 38
<b>cA</b>	18 - 19	20 - 21	22 - 23	24 - 25	26 - 27	28 - 29

### Lengtemaat D

ID petit: 36 - 39 cm  
ID regular: 40 - 43 cm

### Lengtemaat F

IF: 58 - 62 cm

### Lengtemaat G

IG: 69 - 74 cm

# JOBST® BELLAVAR ARMKOUS




Geschikt voor trombose met oedeem,  
licht en stabiel lymfoedeem en lipoeedeem



## KENMERKEN

- Rondbreikous van een **bijzonder stevige kwaliteit**
- Patiënt heeft oedeemvorming en meer **ondersteuning nodig**
- Niet geschikt voor patiënten met een kwetsbare huid of grote omvangverschillen

## ASSORTIMENT

Uitvoering ▼				
		CG*	CG1*	CH*
Druk- klasse	CCL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●
Boord- afwerking	Noppen	●	●	
Opties	BH-bevestigingsband			●

\*Alleen maatwerk

Kijk voor alle opties en tijdelijke trendkleuren op [jobst.nl](http://jobst.nl)

## SAMENSTELLING

Klasse	Polyamide	Elastaan
2	65%	35%

## KLEUREN



Sahara

## AFWERKING



Noppen



# JOBST® BELLA LITE ARMKOUS



Geschikt voor lymfoedeem en lipoedeem



## KENMERKEN

- Hoog draagcomfort dankzij de **luchtdoorlatende** en **lichtgewicht** breistructuur
- Kan geschikt zijn als **extra** kous
- Patiënt heeft **licht** oedeem

## ASSORTIMENT

Uitvoering ▼			
		ACI	CG
Druk- klasse	CCL 1: 15 - 20 mmHg*	●	●
	CCL 2: 20 - 30 mmHg*	●	●
Boord- afwerking	Noppen		●

\*Klasse-indeling volgens de Amerikaanse norm

Kijk voor alle opties en tijdelijke trendkleuren op [jobst.nl](http://jobst.nl)

## KLEUREN



Beige



Black

## AFWERKING



Noppen

# MAATTABEL

JOBST® Bella Lite armkous



## CONFECTIE MAATTABEL (IN CM)

Maat	Small	Medium	Large
JOBST Bella Lite armkous 15-20 mmHg en 20-30 mmHg			
<b>Omvang pols (C)</b>	14 - 20	16 - 22	18 - 24
<b>Omvang midden onderarm (D)</b>	18 - 23	23 - 29	29 - 34
<b>Omvang midden bovenarm (F)</b>	22 - 40	27 - 45	33 - 51
JOBST Bella Lite handschoen 15-20 mmHg en 20-30 mmHg			
<b>Omvang vingeraanzet (A)</b>	15 - 29	19 - 22	22 - 26
<b>Omvang pols (C)</b>	14 - 20	16 - 22	18 - 24

### Lengtemaat G


IG regular: tot 43 cm

IG lang: vanaf 43 cm

# COMPRESSIEKLASSEN, INDICATIES, CONTRA-INDICATIES

Compressieklassen*		Indicaties
CCL1	Been 18-21 mmHg	Vermoeide, zware en pijnlijke benen, milde spataderen zonder oedeem, lichte zwelling van de enkels, voeten en benen, beginnende zwangerschapspataderen, hartfalen onder medisch toezicht, oedeem van arteriële oorsprong (op geleide van uitslag vooronderzoek), artritische patiënten, primair en secundair lymfoedeem in ISL-stadia 0-I met geen of minimale oedeemvorming, lipoedeem met lichte klachten
	Arm 15-21 mmHg	Primair en secundair lymfoedeem in ISL-stadia 0-I; lipoedeem; Syndroom van Paget-von-Schroetter (trombose van de arm- en schoudergordelader); Syndroom van Klippel-Trenaunay; Reumatoïde artritis, hypertrofische littekens
CCL2	Been 23-32 mmHg	Vermoeide, zware en pijnlijke benen, matige tot ernstige spataderen met en zonder oedeem, matige tot ernstige zwangerschapspataderen met en zonder oedeem, matige neiging tot oedeem, chronische veneuze insufficiëntie (CVI) C3-C5 volgens CEAP: veneus oedeem, huidlaesies en genezen veneuze beenulcera, helpt recidieven van veneuze ulcera te voorkomen, oedeem van arteriële oorsprong (op geleide van uitslag vooronderzoek), voor de nabehandeling van oppervlakkige tromboflebitis / SVT, na aderchirurgie, post-sclerotherapie, posttraumatisch en postoperatief oedeem, artritische patiënten met beperkte behendigheid, primair en secundair lymfoedeem in ISL-stadia I-II, lipoedeem
	Arm 23-32 mmHg	Primair en secundair lymfoedeem in ISL-stadia I-III; lipoedeem; Syndroom van Paget-von-Schroetter (trombose van de arm- en schoudergordelader); Syndroom van Klippel-Trenaunay; Reumatoïde artritis, hypertrofische littekens
CCL3	Been 34-46 mmHg	Ernstige spataderen met en zonder oedeem, ernstige neiging tot oedeem, chronische veneuze insufficiëntie (CVI) C3-C6 volgens CEAP: veneus oedeem, huidveranderingen, genezen veneuze beenulcera en veneuze beenulcera, helpt recidieven van veneuze ulcera te voorkomen, posttrombotisch syndroom (PTS), voor de nabehandeling van oppervlakkige tromboflebitis / SVT, na aderchirurgie, post-sclerotherapie, actieve patiënten met lymfoedeem in ISL stadium III, ernstig lipoedeem
CCL4	Been > 49 mmHg	Ernstig posttrombotisch syndroom PTS, ernstig lymfoedeem bij ISL stadium III, ernstige neiging tot oedeem (niet van arteriële oorsprong)

\*Oppervlaktedruk op meetpunt B (enkelgebied, been) of meetpunt C1 (pols, arm)

Contra-indicaties	
	<p><b>Contra-indicaties JOBST compressieproducten mogen niet worden gedragen in de volgende gevallen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gevorderde arteriële insufficiëntie, waaronder ischemie</li> <li>• Gedecompenseerd hartfalen</li> <li>• Onbehandelde septische flebitis</li> <li>• Phlegmasia coerulea dolens</li> <li>• Intolerantie voor gebruikte materialen</li> <li>• Open wonden die niet zijn afgedekt met een geschikt wondverband</li> </ul>



## TIPS

---

Meet met behulp van een **maatplank** om zeker te zijn van correcte lengtematen. Ook bij herhalingsmetingen komt de maatplank van pas; je weet zeker dat je op dezelfde punten de omvang meet. Hierdoor zijn eventuele verschillen met de vorige meting ook beter te vergelijken.

Een rondbreikous is vooral geschikt voor patiënten met omvangsmaten die **niet teveel uiteen lopen**. Kies in het geval van een conische beenvorm liever voor vlakbrei.

Rondbreikousen zijn zeer elastisch en het verdelen van de stof kan daardoor lastig zijn. Slecht verdeelde stof geeft sneller klachten van insnoering. Het gebruik van **aantrekhandschoenen** maakt het verdelen veel gemakkelijker. Ook bestaat er minder kans op haaltjes of gaatjes in de kous. Wijs je patiënt op de aanschafmogelijkheden.



## BESTELFORMULIEREN

Scan de QR-code om naar de downloadpagina te gaan.