

**JOBST®**  
**VLAKBREI**  
**ASSOR-**  
**TIMENT**



**JOBST®** NIETS HOUDT JE TEGEN

ELVAREX | ELVAREX PLUS | ELVAREX SOFT | ELVAREX SOFT SEAMLESS | CONFIDENCE

# ALTIJD EEN OPLOSSING DIE BIJ DE PATIËNT PAST

Het leven van jouw patiënten positief beïnvloeden geeft voldoening. Je helpt ze letterlijk weer op de been. Om hen zo goed mogelijk te helpen om te leven met chronisch oedeem, lymfoedeem of lipoeedeem is het belangrijk dat jouw patiënten een compressiehulpmiddel vinden dat optimaal voldoet aan hun behoeften en hen ondersteuning biedt bij de problemen die vaak voorkomen bij de behandeling van de symptomen.

Het vlakbrei assortiment van JOBST staat synoniem voor optimale therapeutische werkzaamheid bij de behandeling van lymfoedeem en lipoeedeem.

## JOBST® ELVAREX

### Een stevige kous voor effectief oedeemmanagement

- **Micromassage:** de structuur van JOBST Elvarex creëert een micromassage-effect op de huid bij elke beweging, mobiliseert oedeem en verbetert hierdoor de lymfedrainage
- **Ademend:** speciale luchtdoorlatende breistructuur waardoor de huid koel blijft
- **Comfort:** beschikbaar met comfortzones en siliconenboord met micronoppen voor extra gemak

## JOBST® ELVAREX SOFT

### Een lichte, ademende en huidvriendelijke therapeutische elastische kous, speciaal ontworpen voor patiënten met een gevoelige of kwetsbare huid

- **Extra zacht:** dankzij de geoptimaliseerde breitechniek en zachte garens
- **Ontworpen voor gebruiksgemak:** gemakkelijk aan- en uit te trekken

## JOBST® CONFIDENCE

### De nieuwe innovatieve kous die meer comfort biedt en een actieve levensstijl ondersteunt

- **Zacht en stevig:** JOBST Confidence is vervaardigd van soepel materiaal dat zacht is maar óók stevige ondersteuning biedt
- **Countour fit:** dankzij de unieke breimethode vormt de kous zich goed naar individuele lichaamscontouren. Bij JOBST Confidence kunnen steken op vier posities worden toegevoegd. Dit maakt meer dan ooit een persoonlijke pasvorm van de therapeutische elastische kous mogelijk
- **Vochtbeheer:** geavanceerd vochtregulatiesysteem voor optimaal draagcomfort

# INNOVATIES VOOR EXTRA COMFORT

## STREVEN NAAR OPTIMAAL DRAAGCOMFORT

Comfort kan een belangrijk aspect zijn voor de patiënt, het kan namelijk helpen om dagelijkse compressietherapie vol te houden. JOBST Elvarex, JOBST Elvarex Soft en JOBST Confidence bieden verschillende productopties die zorgen voor meer draagcomfort.



### COMFORTZONES

De knie en elleboog kan een gevoelige plek zijn. De **knie- en elleboogcomfortzones** in de JOBST Elvarex kous bieden een comfortabele oplossing door het speciale zachte garen in combinatie met unieke breitechniek.

Ook biedt de **enkelcomfortzone** extra comfort en voorkomt insnoeren op de wreef.\*

Forse bovenbenen of een groot lengteverschil tussen lies en bilplooï maken het soms moeilijk om voor AG kousen te kiezen.

De **topcomfortzone** in Elvarex en Elvarex Soft bestaat uit een verhoogd bovenbeendeel aan de voorkant én zijkant. Hierdoor sluit de kous beter aan op de anatomie en neemt de kans op afzakken af.

Elleboogcomfortzone Elvarex armkous

## BOORDOPTIES

De **SoftFit-technologie** is beschikbaar voor JOBST Elvarex, JOBST Elvarex Soft en JOBST Confidence en verhoogt het draagcomfort van de kous dankzij het meegebreide siliconengaren aan de binnenzijde van de boord. Het speciale garen sluit zacht aan op de huid en houdt de kousen op hun plek. SoftFit voorkomt stuwing en zorgt voor graduele compressie die de natuurlijke veneuze bloedstroom en lymfe-afvoer ondersteunt.

Het **Siliconenboord met micronoppen** biedt net als de SoftFit-technologie meer draagcomfort en is zeer geschikt voor de gevoelige huid. De micronoppen zorgen voor een bijzonder goede hechting en voorkomen dat de kous afzakt. Deze boordoptie is optioneel bij Elvarex en Elvarex Soft maatwerk.



\* Enkelcomfortzone alleen beschikbaar voor JOBST Confidence


# WANNEER ZET JE WELKE JOBST®

## VLAKBREI COMPRESSIEVOORZIENING IN?

Bij het kiezen van het meest geschikte vlakbreimateriaal kan de ISL-classificatie<sup>1</sup> helpen. Dit geldt ook voor chronisch oedeem bij veneuze aandoeningen. Gebruik het Hulpmiddelenkompas om te bepalen of je patiënt in aanmerking komt voor vlakbreikousen. Bij twijfel kun je altijd contact opnemen met je JOBST Account Manager.

### STADIUM VAN LYMFOEDEEM<sup>1</sup>

1	2A	2B	3
<b>ISL classificatie</b>	<b>ISL classificatie</b>	<b>ISL classificatie</b>	<b>ISL classificatie</b>
De aandoening uit zich in het begin door oedeem dat weer verdwijnt als de arm of het been hoog gelegd wordt. Het oedeem kan in dit stadium pitting zijn.	Het oedeem gaat nauwelijks weg door de arm of het been hoog te leggen en pitting is goed zichtbaar.	In dit stadium verschuift het karakter naar non-pitting en kan fibrose ontstaan.	Het weefsel voelt hard aan (fibrose). Er ontstaan veranderingen in de huid, zoals verdikkingen, hyperpigmentatie, diepe en harde huidplooiën, vervetting en wratjes.

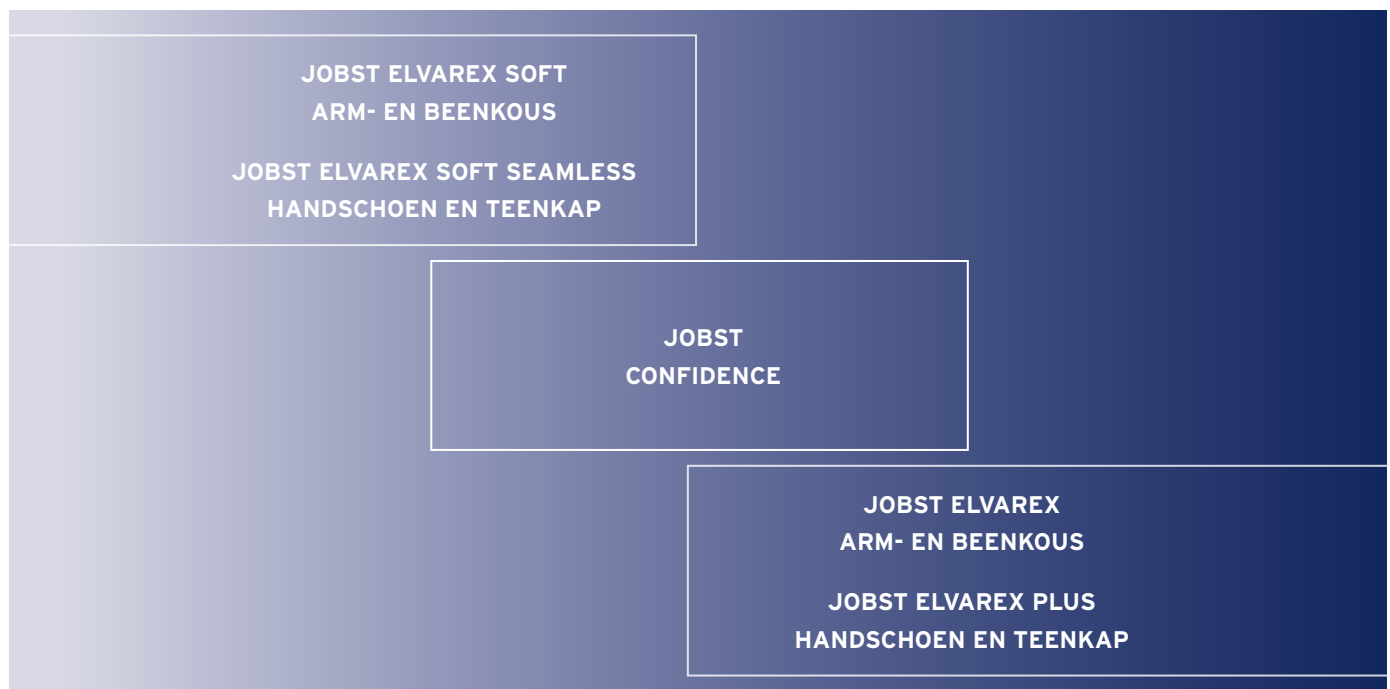

Bij lipoedeem kan het behandeldoel ook vermindering van pijn en/of het verbeteren van mobiliteit zijn. Indien er geen sprake is van (lymf)oedeem kun je ook kiezen voor een kous uit het JOBST rondbrei-assortiment.

<sup>1</sup> Aangepast op grond van: The Diagnosis and Treatment of Peripheral Lymphedema. 2016 Consensus Document of the International Society of Lymphology (ISL). Lymphology 2016; 49: 170-184

# JOBST® ELVAREX® BEENKOUS<sup>1</sup>

De sterke vlakbrei kous, geschikt vanaf ISL-classificatie 2B tot en met 3



## VOORDELEN VAN JOBST® ELVAREX®

- Sterk en slijtvast materiaal
- Zeer breed assortiment in maatwerk
- Luchtdoorlatend voor meer comfort

## ASSORTIMENT BEENKOUSEN


Uitvoering ▼																		
		AD'	AA	AB	ABI	AD	AF	AG	AG-T	AT**	AG-HT	BIG	BD	BG	CG	CG-T	CT-GT	DF
Drukklasse	CCL 1: 18 - 21 mmHg		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CCL 3: 34 - 42 mmHg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CCL 3 forte: 38 - 46 mmHg			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CCL 4: > 49 mmHg			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	CCL 4 super: > 70 mmHg			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Boordwerking	Noppen				•	•	•	•	•			•	•	•	•	•		•
	Micronoppen					•		•										
	SoftFit					•												
Teen- stuk	Open	•		•	•	•	•	•	•	•								
	Gesloten	•		•	•	•	•	•	•	•								
Opties	Kniecomfortzone						•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
	D-schuin					•							•					
	Topcomfortzone							•					•		•	•		

\* Confectie \*\* AG in combinatie met leibbinde of AG in combinatie met Bellavar broek (volle compressie)


## SAMENSTELLING

Klasse	Katoen	Polyamide	Elastodiene	Elastaan
1		72%	12%	16%
2	29%	40%	21%	10%
3	41%	32%	21%	6%
3F	41%	27%	26%	6%
4	39%	26%	30%	5%
4S	39%	24%	32%	5%

## KLEUREN

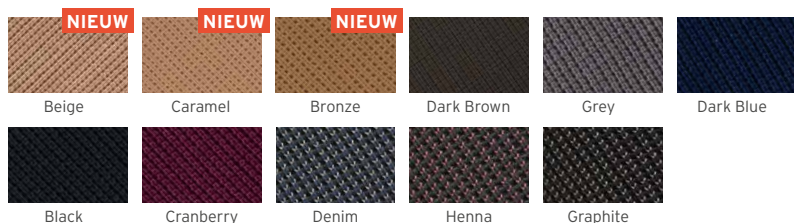

## AFWERKING

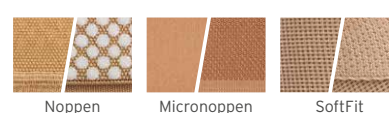

<sup>1</sup> Geschikt bij diepe huidplooiën

# JOBST® ELVAREX® ARMKOUS

De sterke vlakbrei kous, geschikt vanaf ISL classificatie 2B tot en met 3

## VOORDELEN VAN JOBST® ELVAREX®

- Sterk en slijtvast materiaal
- Perfecte anatomische vorm
- Luchtdoorlatend voor meer comfort




## ASSORTIMENT

Uitvoering ▼													
		AC <sup>1</sup>	AE	AE <sup>1</sup>	AG	AG <sup>1</sup>	AH	CE	CE <sup>1</sup>	CG	CG <sup>1</sup>	CH	DF
Drukklasse	CCL 1: 18 - 21 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CCL 2 forte: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Boord-afwerking	SoftFit									●	●		
	Noppen	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●
	Micronoppen				●	●				●	●		
Opties	Elleboogcomfortzone									●	●	●	
	BH-bevestigingsband						●					●	

## SAMENSTELLING

Klasse	Polyamide	Elastodiene	Elastaan
1	73%	12%	15%
2	70%	20%	10%
2F	63%	27%	10%

## KLEUREN

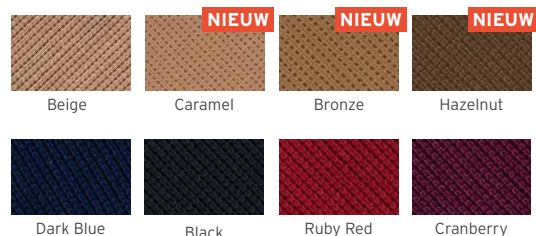

## AFWERKING




# JOBST® ELVAREX® PLUS




Vlaktbrei handschoen en teenkap, geschikt vanaf ISL classificatie 2B tot en met 3

## VOORDELEN VAN JOBST® ELVAREX® PLUS

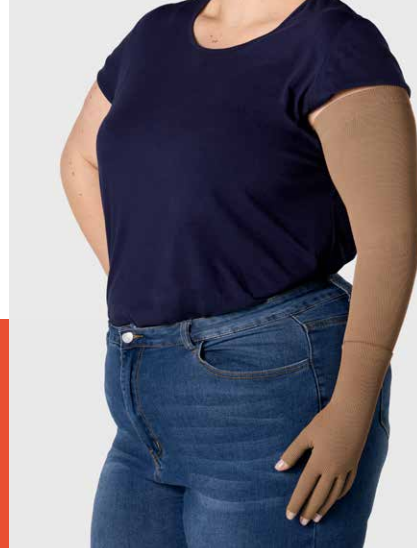- Perfecte pasvorm door 3D-breitechniek
- Maximale bewegingsvrijheid door naadloze afwerking
- Sterk en slijtvast voor effectief oedeemmanagement



## ASSORTIMENT

Uitvoering ▼				
		AC <sup>1</sup>	AE	AA
Druk- klasse	CCL 1: 18 - 21 mmHg	●	●	●
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●
Teen- stuk	Open			●
	Gesloten			
Hand	Met duim, zonder vingers	●	●	
	Met duim, met vingers	●	●	


## SAMENSTELLING HANDSCHOEN

Klasse	Polyamide	Elastodiene	Elastaan
1	73%	12%	15%
2	70%	20%	10%

## SAMENSTELLING TEENKAP

Klasse	Katoen	Polyamide	Elastodiene	Elastaan
1		72%	12%	16%
2	29%	40%	21%	10%

## KLEUREN

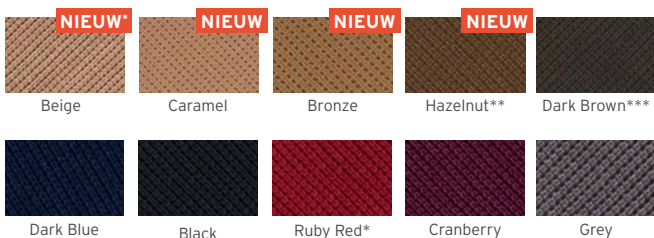

\* Beige is een nieuwe kleur voor de teenkap

\*\* Ruby Red en Hazelnut zijn alleen beschikbaar als handschoen

\*\*\* Dark Brown is alleen beschikbaar als teenkap

# JOBST® ELVAREX® SOFT

De comfortabele aanpak van oedeem, geschikt vanaf ISL classificatie 1 tot en met 2A



## VOORDELEN VAN JOBST® ELVAREX® SOFT

- Meer draagcomfort door het unieke zachte materiaal
- Meer aantrekgemak
- Luchtdoorlatend voor een aangenaam gevoel

## ASSORTIMENT

Uitvoering ▼							
		AD*	AD	AG	AG-T	AT	CG <sup>1</sup>
Druk- klasse	CCL 1: 18 - 21 mmHg						●
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●
	CCL 3: 34 - 46 mmHg	●	●	●	●	●	
Boord- afwerking	SoftFit		●				●
	Noppen	●	●	●			●
	Micronoppen		●	●			●
Teen- stuk	Open	●	●	●	●	●	
	Gesloten		●	●	●	●	
Opties	Slipvorm tweezijdig					●	
	Topcomfortzone			●			

\*Confectie


## SAMENSTELLING BEENKOUS

Klasse	Polyamide	Elastaan
2	70%	30%
3	65%	35%


## SAMENSTELLING ARMKOUS

Klasse	Polyamide	Elastaan
1	70%	30%
2	65%	35%

## KLEUREN

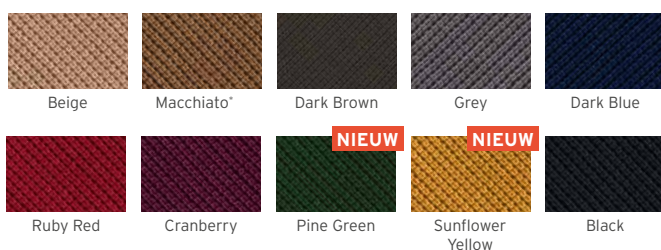

## AFWERKING

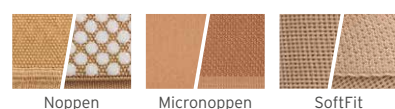

\*Macchiato is alleen beschikbaar als armkous



# JOBST® ELVAREX® SOFT SEAMLESS




Vlaktbrei handschoen en teenkap, geschikt vanaf  
ISL classificatie 1 tot en met 2A



## VOORDELEN VAN JOBST® ELVAREX® SOFT SEAMLESS

- Gemaakt van het unieke zachte Elvarex Soft materiaal
- Naadloos voor meer comfort en therapietrouw
- Perfecte anatomische vormgeving


## ASSORTIMENT

Uitvoering ▼				
		AC <sup>1</sup>	AE	AA
Druk- klasse	CCL 1: 18 - 21 mmHg	●	●	●
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●
Teen- stuk	Open			●
	Gesloten			
Hand	Met duim, zonder vingers	●	●	
	Met duim, met vingers	●	●	

## SAMENSTELLING

Klasse	Polyamide	Elastaan
1	70%	30%
2	65%	35%

## KLEUREN

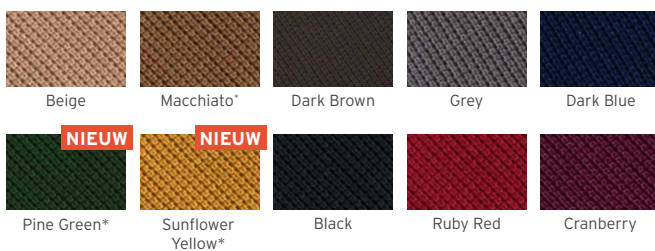

\*Macchiato, Pine Green en Sunflower Yellow alleen beschikbaar als handschoen

# JOBST® CONFIDENCE BEENKOUS<sup>1</sup>

De innovatieve vlakbrei kous, geschikt vanaf  
ISL classificatie 2A tot en met 2B



## VOORDELEN VAN JOBST® CONFIDENCE

- Sluit zeer goed aan op de lichaamscontouren dankzij de unieke Contour Fit
- Vervaardigd van soepel materiaal dat zacht is maar ook stevige ondersteuning biedt

## ASSORTIMENT

Uitvoering ▼										
		AB1	AD	AG	AT	AG-HT	BIT	BT	CT	ET
Drukklassie	CCL 1: 18 - 21 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	CCL 3: 34 - 42 mmHg	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Boord-afwerking	Noppen			●						
	SoftFit		●							
Teen-stuk	Open	●	●	●	●	●				
	Gesloten	●	●	●	●	●				
Opties	Schuin	●	●	●	●	●				
	Hallux	●	●	●	●	●				
	Enkelcomfortzone	●	●	●	●	●				
	Kniecomfortzone			●	●	●	●	●	●	

## SAMENSTELLING

Klasse	Polyamide	Polypropylene	Elastaan
1	59%	26%	15%
2	48%	32%	20%
3	45%	32%	23%

## KLEUREN



## AFWERKING



<sup>1</sup> Geschikt bij groot verschil in omvangsmaten

# JOBST® CONFIDENCE ARMKOUS



De innovatieve armkous, geschikt vanaf ISL classificatie 2A tot en met 2B



## VOORDELEN VAN JOBST® CONFIDENCE

- Sluit zeer goed aan op de lichaamscontouren dankzij de unieke Contour Fit
- Vervaardigd van soepel materiaal dat zacht is maar ook stevige ondersteuning biedt


## ASSORTIMENT

Uitvoering ▼			
		AG1	CG1
Druk- klasse	CCL 1: 18 - 21 mmHg	●	●
	CCL 2: 23 - 32 mmHg	●	●
Boord- afwerking	Noppen	●	●
	SoftFit	●	●
Opties	Elleboogcomfortzone	●	●

## SAMENSTELLING

Klasse	Polyamide	Polypropylene	Elastaan
1	59%	26%	15%
2	48%	32%	20%

## KLEUREN

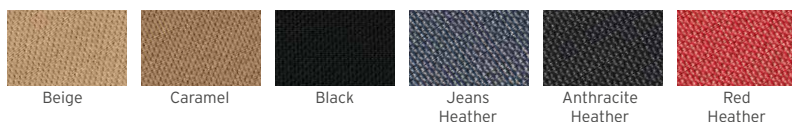

## AFWERKING





## BESTELFORMULIEREN

Scan de QR-code om naar de downloadpagina te gaan.



JOBST®,  
an Essity brand

Essity Netherlands BV  
Arnhemse Bovenweg 120  
3708 AH Zeist, Nederland

030 - 69 84 700  
jobst.cs.nl@essity.com  
www.jobst.nl



03926969M