


# JOBST® COMPRILAN®



## KORTEREK ZWACHTEL VOOR COMPRESSIETHERAPIE

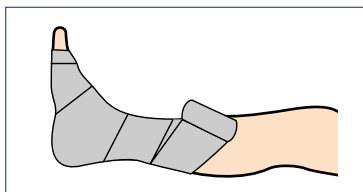

Een correct aangelegde korterek zwachtel geeft graduele compressie waardoor de spierpomp wordt ondersteund en de veneuze terugstroom wordt bevorderd. De zwachtel geeft een hoge werkdruk en een lagere rustdruk en kan daardoor dag en nacht worden gedragen. **Comprilan** is een korterek zwachtel die dag en nacht ondersteuning, verlichting en compressie biedt.

### INDICATIES VOOR COMPRESSIETHERAPIE MET KORTEREK ZWACHTELS

- Patiënten met spataderen, chronische veneuze insufficiëntie, diep veneuze trombose, thrombophlebitis (aderontsteking), ulcus cruris venosum.
- Na vaatoperaties (stripping) of het wegsputten (scleroseren) van spataderen.
- Patiënten met oedeem door flebologische en/of lymfatische aandoeningen.



## COMPRILAN®

- ✓ **Ademend** en gemaakt van **100% katoen**.
- ✓ **Duurzaam**: kan tot 10 keer opnieuw worden gebruikt en is wasbaar op 60 graden. De stof behoudt de therapeutische eigenschappen na sterilisatie in de autoclaaf. Niet geschikt om te strijken, bleken of drogen in de wasdroger.
- ✓ Heeft een **lengterek** van 90%.

## CONTRA-INDICATIES

- Vergevoerde insufficiëntie van de perifere slagaderen
- (Onbehandeld) hartfalen
- Aderontstekingen
- Acute ontsteking van de diepe beenaderen

## ASSORTIMENT

Omschrijving	Artikel-nummer	Z-index nummer	Inhoud per doos	Inhoud verzendkarton
Comprilan 5 m x 6 cm	01026-00	12823066	1	40 x 5 (200)
Comprilan 5 m x 8 cm	01027-00	12823074	1	34 x 5 (170)
Comprilan 5 m x 10 cm	01028-00	12823082	1	28 x 5 (140)
Comprilan 5 m x 12 cm	01029-00	12823090	1	24 x 5 (120)
<b>Dubbele zwachtel in verpakking ten behoeve van onderbeen</b>				
Comprilan 5 m x 10 cm - per 2	01030-00	12823104	2	4 x 1 (4)
<b>Basis zwachtelset ten behoeve van onderbeen</b>				
Comprilan Total	01233-02	15791785	1	4 x 1 (4)
<b>Complete zwachtelset ten behoeve van onderbeen</b>				
Comprilan Compressiebox	01233-00	14566273	1	4 x 1 (4)